


MULTIFUNKCIÓS SZÉPSÉGÁPOLÁSI ARCKEZELŐ GÉP

EMS Szépségápolási Eszköz Ionizáló Funkcióval Arcra

Egy gép, ami megold minden bőrápolási teendőt!

Használati útmutató

Termék struktúrája:

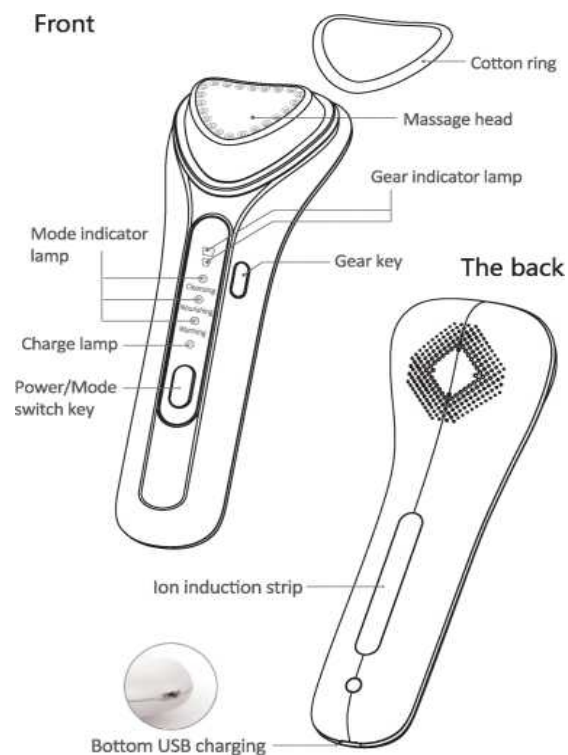

Gép eleje található:

1. Mód indikátor lámpa
2. Töltési szint lámpa jelző
3. Bekapcsoló gomb/mód kiválasztó gomb
4. Pamut kendő tartó gyűrű
5. Masszázs fej
6. Sebeségváltó jelzőlámpa
7. Sebeségváltó gomb

Gép hátuljám található:

1. Ionok bevezető része
2. USB töltés helye

Gép specifikációi:

Virációs funkció	10000 rpm
Termék méretei	158x55x40mm
Nettó súly	88g
Töltési üzemi idő	2 óra
Hő mértéke	42 celcius (+/-3)
Termék anyaga	ABS
Volt (V)	3.7V
Erőssége	< 3.5 W
Származási hely	Kína

Gép jellemzői:

Ez a termék egy arcra kifejlesztett szépségápolási eszköz, amely tisztít, mélyen táplál és a meleg funkció segítségével mélyen hidratál. Magas frekvenciájú rezgéssel rendelkezik pozitív és negatív ionok mennyiségét köszönhetően.

- ✓ **Pozitív és negatív ionok:** A pozitív és negatív töltésű ionok kombinálásával és abszorpciójának alkalmazásával a mély pórusokból a szennyeződések biológiai árammal nyeri ki. Ennek köszönhetően alaposan megtisztítja a bőr mélyebb rétegeit is. Ezzel a funkcióval a kozmetikai hatóanyagok, a ionok segítségével a bőr legmélyebb rétegébe is eljuthatnak.
- ✓ **Vibrációs rezgés:** A mechanikus rezgéssel és feszültség stimulálással növeli a bőr rugalmasságát és fokozza a bőrsejtek anyagcseréjét.
- ✓ **A meleg hőhatás:** Segíti az értékes összetevők mély rétegben történő felszívódását. Ezzel hatékonyabban javítva a bőr textúráját, amitől az arc bőr teltebb és fiatalosabb lesz.
- ✓ **Tisztító és importáló funkció:** A lehető leghatékonyabban beviszi az arcápolók értékes összetevőit, ezzel fokozza a sejtek aktivitását. Illetve ez a funkció segít a ráncok kezelésében.
- ✓ **A meleg hidratáló mód:** A meleg masszázsmód elősegíti a vérkeringés, fokozza a bőr feszeségét és rugalmasságát. Segíti, hogy ezt a hatást hosszú ideig megtartsa a bőr, helyreállítva a bőr csillogását és életerőjét.

Használat közben érintse meg a gép hátán lévő ionos bevezető részét (a vékony csíkot), hogy az érintéssel létre jöjjön ez a funkció.

Az intelligens beállítás minden üzemmódba 4 perc felhasználási idővel rendelkezik. A műszer 4 perc elteltével készenléti állapotba lép, ha nincs más művelet, és 1 perccel később automatikusan kikapcsol.


Használati útmutató:

1. Bőrtisztítási funkció:

Célszerű pamutból készült tisztító kendőt, vagy make up pamacsot használni.



Ez a funkció a porúsok mélyebb rétegeiből is eltávolítja a szennyeződést és tisztává varázsolja a bőrt.

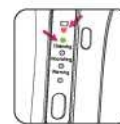

Vegye le a make up tisztító tartó gyűrűt és csatolja a pamutból készült törölkendő, majd tegye rá a kívánt arctisztító folyadékot.



Az elindításhoz nyomja meg hosszan a bekapcsolási gombot.

Válasza ki a bőr tisztítási funkciót (Cleansing), majd a zöld fény fogja Önnek jelezni a készülék elindítását.

A vibrációs frekvencia funkciót is választhatja hozzá. Igény szerint a funkció erősségén is változtathat (erősebb vagy gyengébb üzemmód), amit a piros fény fog jelezni.

Kézi érintkezéssel az ionérzékelő csíkon, ami a gép hátulján található, elkezdhetjük a kezelést, a képen jelzet módokon.

2. Hidratáló és importáló funkció:

Ez a funkció hatékonyan serkenti a bőrt, és segíti a bőr ellazulásában. Segít a bőrápolási termékekben lévő értékes összetevők jobb felszívódását, amivel a elősegítjük mély hidratálást.



A bőrápolóját egyenletesen vigye fel bőrére, majd az elindításhoz nyomja meg hosszan a bekapcsolási gombot.



Válassza ki a hidratáló funkciót (Nourishing). A zöld fény jelezi Önnek a készülék elindítását.



A vibrációs frekvencia funkciót is választhatja hozzá. Igény szerint a funkció erősségén is változtathat (erősebb vagy gyengébb üzemmód), amit a piros fény fog jelezni.

Kézi érintkezéssel az ionérzékelő csíkon, ami a gép hátulján található, elkezdhetjük a kezelést, a képen jelzet módokon.

3. Meleg hidratáló funkció:

Ez a funkció finoman felébreszti és ellazítja a bőrt. Segít a csillogás és vitalitás helyreállításában.

Tisztítás után vigyen fel bőrére a kedvenc arcápoló termékét.

Az elindításhoz nyomja meg hosszan a bekapcsoló gombot.



Válasza ki a meleg hidratáló funkciót (Warming). A zöld fény jelezi Önnek a készülék elindítását.



A vibrációs frekvencia funkciót is választhatja hozzá. Igény szerint a funkció erősségén is változtathat (erősebb vagy gyengébb üzemmód), amit a piros fény fog jelezni.



Kézi érintkezéssel az ionérzékelő csíkon, ami a gép hátulján található, elkezdhetjük a kezelést, a képen jelzet módokon.

Fontos tudnivalók:

- ✓ A tisztító funkcióval a bőr felszínére kerülnek a porúsok mélyebb rétegeiből eltávolított szennyeződések. Ezért a kezelés végén használjon arctisztítót a bőr felszínének a megtisztításához.
- ✓ Ha az ujj nem érinti az ion indukciós csíkot a készülék hátulján, akkor nem jön létre a vibrációs funkció.
- ✓ Ez a termék a mikro áram-ion technológiával működik. Enyhe elektromos impulzust fog érezni, de ez normális jelenség, kérjük ne ijedjen meg!

