

Többfunkciós Kavitációs testformáló és fogyasztó gép

Használati útmutató

A fizioterápia elvén működő gép négy nemzetközileg elismert technológiát alkalmaz, amely segít a test formálásában és a bőr ápolásában. Ez a hordozható kozmetikai kisgép használata elősegíti és serkenti a bőr sejtek vitalitását, felgyorsítja a test mikrocirkulációját, fokozza a szövetek oxigén ellátását és anyagcseréjét, valamint segíti a bőr regenerálását.

Továbbá fokozza a vérkeringést, segít a makacs zsírpárnák és a narancsbőr csökkentésében, a striák és hegek kezelésében. Rendszeres használata feszesebbé teszi a bőrt.

Karbantartási óvintézkedések


1. Ezt a testformáló és fogyasztó gépet a bőr és a test ápolására tervezték. Használata bármilyen más célra nem alkalmas!
2. Használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. Kövesse a kézikönyv utasításait.
3. Ha bőre nagyon érzékeny a gép használata közben, kérjük rövidítse le a kezelési időt!
4. Kérjük hagyja abba a gép használatát, ha közben kellemetlenül érzi magát! Ebben az esetben keresse fel kezelőorvosát.

A készülék használata nem ajánlott:

- Várandósok
- Epilepsziás betegek
- Pacemakerrel, szívritmus -szabályzóval rendelkezők
- Súlyos szív- és máj betegségben szenvedők
- Allergiás bőrgyulladás esetén

- Napégés okozta bőrpír esetén
- Menstruációs alatt

Biztonságos használat

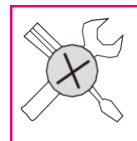

Ne szerelje szét a készüléket!

Gyerekektől távol tartandó!

Tartsa távol a víztől!

Tűztől távol tartandó!

Használat után húzza ki a tápkábelt!


Ne ejtse le a készüléket!

Műszaki adatok

Név	Többfunkciós Kavitációs testformáló és fogyasztó gép
Bemenet	100-240V 50/60HZ
Súly	220g
Anyag	ABS, Rozsdamentes acél
Modell	ZHF-CM-8
Méret	190*90*60mm
Szonda méret	57mm

Típus Száma	QZHF002-2017
-------------	--------------

Termék struktúrája

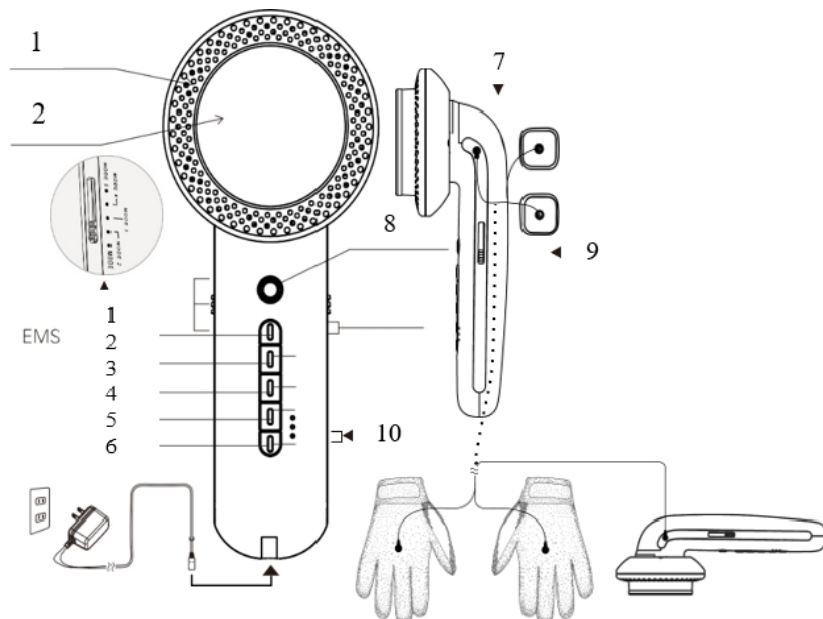

1. Infravörös melegítőrész

2. Ultrahangos és ionos masszázszonda

1. EMS mód kiválasztása

2. EMS/ KESZTYŰ

3. LED Funkció

4. ION-

5. ION+

6. Ultrahangos funkció

7. EMS bemenet

8. Bekapcsolási gomb

9. EMS intenzitás







10. Ultrahangos intenzitás funkció kiválasztása

Hogyan használjuk?		1-2. hét	3-8. hét	Utána	
Mélytisztítás		ION+	3perc/ nap	3 naponta 1 alkalom	Egyszer egy héten
Arcápolás	Öregedésgátló	Ultrahang+ION(-)+Vörös fény	5perc/nap	3 naponta 1 alkalom	Egyszer egy héten
	Érzékeny bőr vagy acné kezelés	Ultrahang+kék fény	5perc/nap	3 naponta 1 alkalom	Egyszer egy héten
Testformálás	Ultrahang	Ultrahang+ION(-)+Vörös fény	10 perc/ testrész/nap	3 naponta 1 alkalom	Egyszer egy héten
	EMS	EMS	15-30 perc/ nap- különböző akupunktúrá s pontokon	15-30 perc 3naponta- különböző akupunktúrá s pontokon	Egyszer egy héten
	Kesztű	EMS kesztű	15-30 perc/ nap- különböző akupunktúrá s pontokon	15-30 perc 3naponta- különböző akupunktúrá s pontokon	Egyszer egy héten

Használat előtti teendők


1. Helyezzen a készülék ultrahangos és ionos lapos felületére néhány csepp vizet.
2. Nyomja meg a bekapcsoló gombot.
3. Válassza ki a gép ultrahang funkcióját.
4. Válassza ki az ultrahang intenzitását: magas, közepes vagy alacsony.

Ha a vízcseppek elkezdnek rezegni, az azt jelenti, hogy az ultrahang funkció elkezdődött.

ARCÁPOLÁSI TANÁCSOK			
Távolítsa el a sminket. Tisztítsa meg bőrét a kezelés előtt. Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz!			
Mélytisztítás			
	Egyenletesen tisztítsa meg arclemosójával az arc bőrét	Válassza ki az ION+ funkciót és válasszon ki egy Önnek megfelelő intenzitás szintet, majd kezdje el a kezelést.	Kérjük kövesse a képen látható kezelési irányt. Az áll íve mentén, felfel a fülek mögé, majd tartsa meg 5másodpercig. Majd ismételje meg többször ezt a mozdulatot.
A bőr tónusának javítása/fokozása			
	Egyenletesen vigye fel	Válassza ki az ION- funkciót +	Kérjük kövesse a képen látható

	bőrére a bőrápoló krémet/gélt.	a SONIC funkciót, majd válasszon ki egy Önnek megfelelő intenzitás szintet. Kapcsolja be a LED funkciót, majd indítsa el a kezelést.	kezelési irányt. Az áll íve mentén, felfel a fülek mögé, majd tartsa meg 5másodpercig. Majd ismételje meg többször ezt a mozdulatot.
Bőr hibák kezelése			
	Egyenletesen vigye fel bőrére a bőrápoló krémet/gélt.	Válassza ki az ION- funkciót + a SONIC funkciót, majd válasszon ki egy Önnek megfelelő intenzitás szintet. Kapcsolja be a LED funkciót, majd indítsa el a kezelést.	Kérjük kövesse a képen látható nyirokmasszázs kezelési irányát.

Arcápolási tanácsok

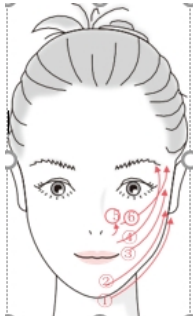

A jelzett irányokban használja a gépet kezelés közben:




A száj sarkától


indulva fel a fül tetejéig.



Az orr aljától indulva fel a képen látható irányban egészen a szemöldök vonaláig.

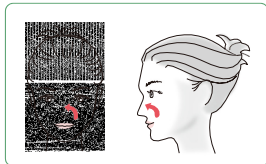

Az orr mindkét oldalát kezeljük, a képen jelzett irányban.

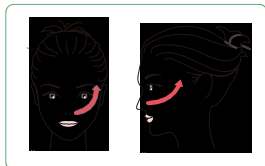

Az orr aljától indulva fel a képen látható irányban egészen a halánték melletti területig.

Figyelmeztetés!

- Kezelés közben minden területet 10 percen keresztül kezeljük. A készüléket kezelés közben a lehető leghosszabban mozgassuk a megjelölt irányok mentén!
- Ultrahangos kezelés és/vagy az ION-os funkció használatakor célszerű bőrápoló terméket használni.
- Kérjük figyeljen, hogy egyenletesen kenje fel a masszázss fejjel a bőrápoló krémet/gélt.
- Fokozottan figyeljen arra, hogy a kezelés közben a kezelő fej teljes terjedelmével folyamatosan érintkezzen a bőrfelületével.!
- Az ionos funkció használatakor nedves kézzel fogja a gép oldalán található elektródacsíkot!


Testformálás



A kezelés előtt tisztítsa meg a kezelendő felületet!



Ezt követően egyenletesen vigye fel a kezelendő területre a krémet/gélt, úgy, hogy közben a bőr egy kicsit nedves maradjon. Több alkalommal is vihetünk fel a bőrünkre krémet/gélt, hogy a levegő szárításának hatását!

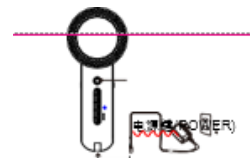

Csatlakoztassa a készülékhez a tápkábelt, majd nyomja meg a bekapcsolási gombot. Ha a jelzőfény pirosan világít, akkor a készülék bekapcsolt állapotban van!

Derék és has formálása: a képen látható kezelési irányok használata javasolt. 1,2,3,4,10 perces sorrended követve/terület


Testformálási tanácsok



Kar kezelése: Válasszon egy közép szintű erősséget. A kezelés ideje körülbelül 3-5 perc/terület. A képen látható kezelési irányt javasolt követni.


Kezelési irány: a könyéktől indítsa el lefele vagy felfele. A

masszázst kis körkörös mozdulatokkal kell végezni. Ezt követően az ábrán látható módon kis köröket kell tenni, a könyék területét elkerülve!

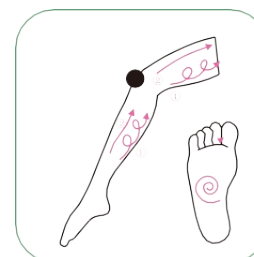

Láb formálása: Használatával javítja és formálja a lábizmokat. Válasszon közép erős szintet. Combként 8-10 perc a kezelési idő.

Kezelési irány: A képen látható módon, a bokától felfelé indulva. A talp területét kis körkörös mozdulatokkal kezelje.

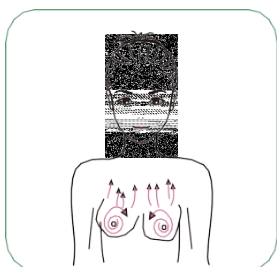


Mell formálása: A kezelés előtt vigyen fel bőrre krémet/gélt. A mellbimbókat ne masszírozza! A kezelés ideje 5 perc.

Kezelési irány: a képen látható módon!




Fenék formálása: Masszírozza a csípőt alulról felfelé, hogy emelje a popsi formáját és formálja a bőrt. Válasszon magas erősségű kezelési szintet. A kezelési idő 8-10 perc.

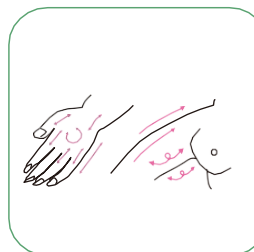

Kézfejek formálása: Válasszon alacsony kezelési szintet. Kezelési idő 5 perc/kéz.

Kezelési irány: a képen látható módokon.

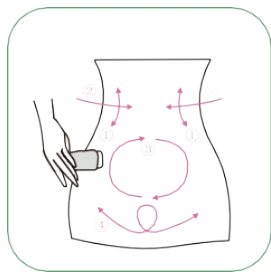

Hogyan kell használni az EMS?


Válassza ki az intenzitás szintjét. Kezdje az 1-es szinttől kezdve, és fokozatosan haladjon felfelé a szinteken.

1. Csatlakoztassa a tápkábelt a géphez.

Hogyan kell használni a kesztyűt?

1. Csatlakoztassa a tápkábelt a készülékhez.
2. Csatlakoztassa a kesztyűt a készülékhez.
3. Állítsa be az EMS intenzitást a legalacsonyabb szintre.
4. Válassza ki a kezelési funkciót/módot.
5. Csatlakoztassa a tápkábelt a kesztyűhöz.
6. Helyezze a kesztyűt a kezelési területre, majd helyezze kényelembe magát.

Kezelési irány tippek:

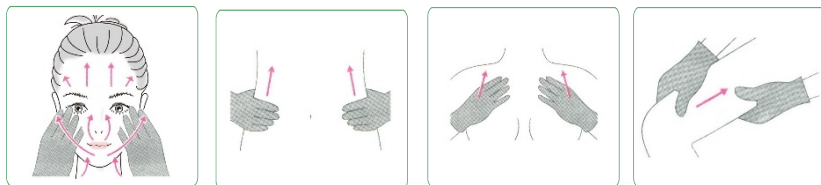

Használat után

1. Kapcsolja ki a készüléket!
2. Nedves kendővel törölje le a szennyeződést a masszázsfelületről.
3. A gép tisztításakor ne használjon hígító féléket, benzint vagy más folyadékot.
4. Majd megtisztítva tegye vissza a dobozba!

A készülék funkciói

Kavitáció:

Az ultrahangos masszázs javítja a zsírszövetek csökkentésére. A fényhatás támogatólag hat a bőrre és

Fényterápia

A kék fény segíti a bőrhibák és gyulladást (pattanásos bőr), továbbá aktiválja a sejtek kollagén termelést, színnel támogatható a bőr feszsége. A készülékben 16 db LED dióda van, amelyek biztosítják a kék fény előállítását, azaz a 465 nm hullámhosszt.

A vörös fény visszaadja a bőr rugalmasságát, és enyhíti a gyulladást okozó folyamatokat.

EMS Physiotherapia

Az elektródák felhelyezésével stimuláljuk az izomösszehúzódásokat, amelyeknek természetes következménye a vérkeringés fokozása, és a zsírbontó folyamatok beindítása.


Normális működés mellett az izmok 60-70 joule energiát fogyasztanak /másodperc, de magas frekvencia alatt az izmok képesek akár 3000-4000 joule fogyasztására is.

Masszázs kesztyű

A masszázskesztyű felgyorsítja a vérkeringést, elősegíti az egészséges emésztést és segíti a testsúly csökkenését.

Arckezelés

Az ionizáló funkció támogatja a bőr mélyebb rétegeinek tisztulását és regenerálódását. A pozitív Ionok vonzzák a szennyeződést így egy erős

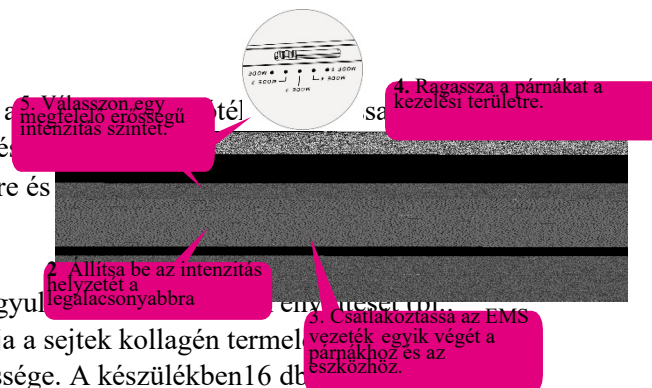

tisztítóhatás lép fel. A kezelés hatására a bőr fagyútermelése is normalizálódik.

A negatív Ionok segítségével eredményesebben be tudunk vinni minden bőrápolót a bőr legmélyebb rétegeibe.

Gyakran felmerülő kérdések

Miért javasoljuk a fém ékszer levételét az ionos funkció használatakor?

- Az ionos funkció használatakor a fém ékszerek ellenállhatnak az eszköz által generált mikroáramnak, csökkentve ezzel a műszer hatékonyságát. A jobb eredmények érdekében kérjük, vegye le a fém ékszereket. Ha nem veszi le akkor nem lesz az ionoknak negatív hatása a bőrre. Biztonságosan használható.

Amikor bekapcsolom a készüléket, semmit sem érzek a készüléktől. Valóban működik?

- Az ultrahangos masszázs különbözik a szokásos gépi rezgésektől (mint pl. motor használata az egyszerű gépi rezgés létrehozásához stb.). A percenként 3 millió finom rezgést nehéz érezni. Kapcsolja be az ultrahang funkciót és cseppentsen néhány csepp vizet a szonda felé. A vízcseppek rezgésén porlasztási hatás megfigyelhető meg.

Miért kell szorosan megtartani az elektródot, ha a karcsúsító funkciót használom?

- Az ionos funkció akkor működik, amikor a kézi elektróda és az ariolektróda képezi az elektromos mező.