


ULTRAHANGOS, RÁDIÓFREKVENCIÁS TESTFORMÁLÓ KÉSZÜLÉK

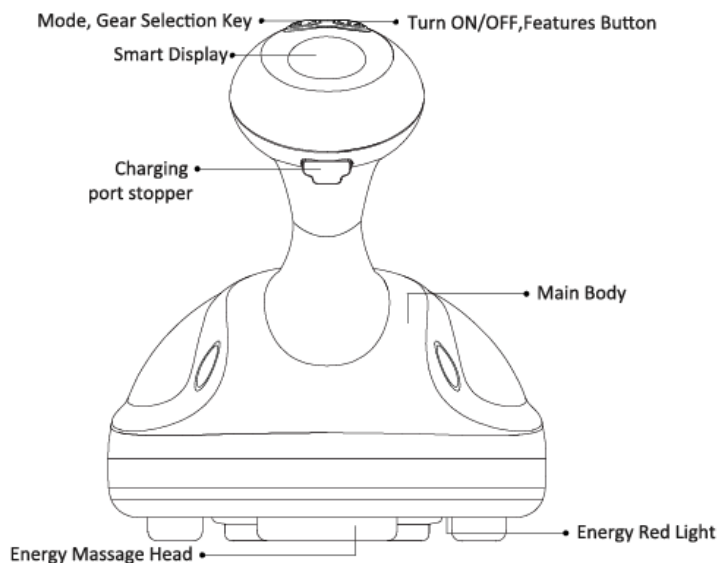

Termék leírás:

1. 680000 alkalommal az ultrahangos, magas frekvenciájú rezgések, azonnal felébresztik a bőr sejtjeit és javítják azok anyagcseréjét. Elősegítik a zsírblokkok bomlását, továbbá

javítják a nyirokkeringést. Erőteljes Rádiófrekvenciás alakformáló funkciója hőhatással, a bőr dermális rétegére fokozza a zsírégetést.

2. A 625 nm hullámhosszú vörös fény magas tisztaságú, erős fotoszintézis energiával és egyenletes energia sűrűségjellemzőkkel aktiválja a bőr sejtjeit. Elősegíti a sejtek anyagcseréjét, mechanikus rezgése elősegíti a kollagén rostok összehúzódását és termelését, felgyorsítja a zsír lebomlását és hatékonyan csökkenti a makacs zsírpárnákat.
3. Egyedi cinkötvözetű masszázsfejjel, rendkívüli érzést hagy maga után. LCD HD intelligens kijelzővel és könnyen kezelhető üzemmóddal felszerelt eszköz. A felhasználóbarát kialakítás, a kifinomult felépítés és a tökéletes extravagáns megjelenés biztosítja a végső fitness élményt az Ön számára.
4. USB töltővel rendelkezik, tartós, energiatakarékos és környezetbarát.

Termék technikai adatai:


Rezgési Frekvencia	680000 alkalom/s
Gép mérete:	90*90*110mm
Üzemi feszültség	8.4V
Áram működés	0.14-2A

Charging Voltage:	5.0V
Töltési feszültség:	16.8W
Nettó súlya:	296g
Bruttó Súly	660g
Töltési idő:	2,5 óra
Folyamatos felhasználási idő:	1 óra

1. Fürdés után vigyen fel egyenletesen karcsúsító krémet vagy olajat, szükség szerint azokra a testrészekre, amiket karcsúsítani szeretne (derék, combok, karok stb. Ezek után nyomja meg a be / ki gombot, válassza ki a megfelelő

üzemmódot és érintse meg az energiás masszázsféjjel a bőrt, hogy elkezdődjön a kezelés.

2. Tartsa szorosan a fogantyút, egyenletesen nyomja a karcsúsítani kívánt területre, majd lefelé és körbe-körbe masszírozza meg a kívánt területet. Ismétlje meg a műveletet 2-3-szor.
3. Használat után kérjük, időben tisztítsa meg a kezelő fejét puha ruhával vagy nedves törlőkendővel.
4. Helyezze a gépet száraz, szellőztetett helyre.
5. Töltés közben először nyissa ki a töltőport szilikon csatlakozóját, majd dugja be az USB kábelt a töltéshez.

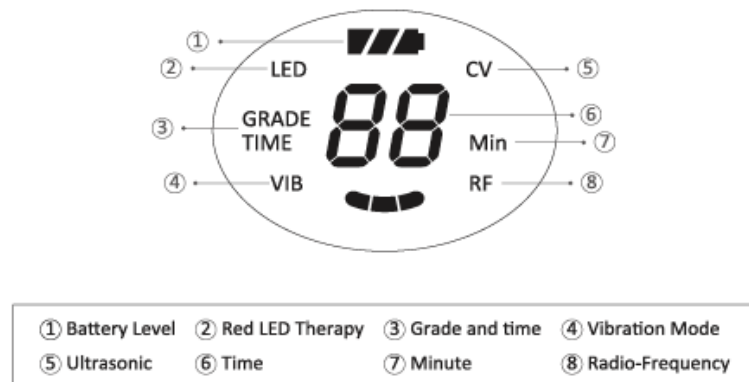

Üzem módok:

(Egyik üzemmód használata sem haladhatja meg a 15 percet!)

Használati mód világos bőrűek számára:

Energia piros LED lámpa + Rádió frekvenciás (RF) üzem mód (a piros lámpa lassan villog, gyorsan villog, folyamatosan világít, három üzemmódban).

Zsírégetés Mód:

Piros LED lámpafény energia +
 Ultrahangos kavitációs üzemmód (CV)

Intenzív zsírbontási mód:

Piros LED lámpa + RF + mechanikus rezgés VIB (három üzem módban: piros Led lámpák gyorsan villognak + szakaszos rezgés, folyamatosan világítanak a piros Led lámpák + hosszú mechanikus rezgés)

Alakformálás mód:

Mechanikus rezgés VIB + ultrahangos CV (három üzemmód: szakaszos mechanikus rövid rezgés, szakaszos mechanikus hosszú rezgés, mechanikus hosszú rezgés).

1. Megváltoztathatja a működési módot a funkcióválasztó gomb megnyomásával.
2. Az eszköz töltéshez használja a megfelelő adaptert.

- Az egy gomb megnyomásával bekapcsolja a készüléket, nyomja meg a gombot és a „di di” hang jelezni fogja a készülék kikapcsolását.; Ha nem elég a töltöttségi szint, akkor „di di” hangjelzéssel fog hallani és a készülék magától kikapcsol. Kérjük, időben töltsse fel a készüléket.

Tippek

- Ha szőrszálakkal fedett testrészen szeretné használni a készüléket kérem először borotválja le és csak utána kezdje el használni a készüléket.

- Fürdőzés után a készülék jobban kifejti a hatását.
- Ha a gépet karcsúsító krémmel / olajjal együtt használja, fokozza a hatást
- Ne használja a készüléket heti 3 alkalomnál többet.
- Ez a termék a kéz, a has, a láb, a combzsír és más zsírok könnyen felhalmozódó részeire alkalmas. (Nem használható: fej, nyak, könyök, csukló, térd, boka, láb, gerinc és más részek.)

Fontos!

1. Terhes nők és bőrbetegségben szenvedő betegek ne használják ezt a terméket.
2. Kerülje el az étkezés utáni egy órán belüli használatát.
- 3 Ne használja fel a készüléket túlzottan, kerülje a túlmelegedést, ami készülék meghibásodásához vezethet
4. Ne használja fürdéskor vagy gőzfürdőnél a készüléket. Kerülje a víz bejutását a készülékbe, mert a készülék meghibásodhat.
5. Ez a termék nem vízhatlan; tisztításához használjon puha ruhát vagy nedves törlőt. Kérjük, tartsa tisztán a gépet, ha hosszú ideig nem használja.
6. Ha rosszul érzi magát a gép használatakor, vagy a bőr felszínén rendelleneségeket észlel, kérjük, hagyja abba a készülék használatát, és keresse fel orvosát.
7. Kérjük, tárolja a készüléket száraz helyen.
8. Kérjük, tartsa távol a készüléket a gyermekektől.

Hasznos Infók

- A termék jobb karbantartása és a hosszú élettartam megóvása érdekében kérjük, ne használja a terméket töltés közben.
2. A termék töltéséhez USB kábelt kell használni, és a teljes feltöltéshez 2,5 órára van szüksége.
 3. Alacsony töltöttségi üzemmódot jelez a készülék, ha az elem ikon a led kijelzőn villog és sípol akkor kérem töltse fel.
 4. Ha az eszköz nem reagál miközben megnyomja a gombot, kérjük töltse fel. Ha a feltöltés után még mindig nem működik akkor kérjük, ellenőrizze a megjegyzéseket.
 6. Töltés közben a képernyőn megjelenik az akkumulátor feltöltése.
 7. Töltés után helyezze száraz és tiszta helyre a biztonságos tárolás érdekében.
 8. A teljes feltöltés kb. 1 órát vehet igénybe.

GYIK

K: Hogyan lehet tudni, hogy mikor fejeződik be az eszköz feltöltése?

V: Az akkumulátor ikon villogása válik és automatikusan leáll.

K: Hogyan lehet tudni, mennyire van feltöltve?

V: Töltését a bekapcsolásnál ellenőrizheti, az akkumulátor ikon növekményes mintázatot mutat, a töltés kikapcsolás esetén, a kijelzőn a „CH” felirat látható

K: Vízálló?

V: A termék nem vízálló, nedves törölkendővel tisztítsa meg az masszázsféjet.

K: Működhet töltés közben?

V: Nem, szivárgási balesethez vezet, csökkentheti a termék élettartamát, először fel kell feltölteni, majd felhasználhatja.